

///3

ortobras
A VIDA NÃO PARA

Ativa, moderna e resistente

Perfeita para você

A M3 conseguiu juntar em uma única cadeira as vantagens de um quadro rígido e de uma cadeira ajustável. A rigidez que confere a sua estrutura, junto com as possibilidades de regulagem convertem a M3 na companheira ideal para a sua vida ativa. Tudo isso em um desenho moderno e uma estética mais esportiva do que nunca.



///3 Robusta e resistente
A última em adaptabilidade



PESO MÁX. USUÁRIO
120
KG

Estrutura resistente e duradoura para uma vida ativa

Seja ativo

O seu estilizado desenho faz com que, uma vez retiradas as rodas e fechar o encosto, a cadeira fica reduzida a um simples chassi em forma de L. Isso, unindo a leveza da cadeira, faz com que seja muito fácil de introduzir em um carro pelo próprio usuário. Forte, eficiente e robusta, a M3 foi aprovada pelas normas NBR 7176 e homologada para usuários de até 120Kg.



Materiais e desenho inovador

A procura de novos materiais e tecnologias foram a chave no desenvolvimento da M3. O material dos raios das rodas traseiras é de titânio, e por utilizar poucos raios torna a roda 1Kg mais leve que as tradicionais de 36 raios de aço. Os raios são extremamente tensionados, o que torna a roda super leve e resistente.



Rodas Sentinel de 12 raios de titânio.



Desenho inovador do garfo. Moderno e com uma grande resistência.

M3 - Uma cadeira a sua medida

A M3 permite uma infinidade de ajustes, sem comprometer o rendimento da cadeira. Por isso, é a cadeira ideal para usuários que estão desenvolvendo suas capacidades de condução, e que desejam que a cadeira seja capaz de adaptar-se as suas futuras alterações. A altura traseira do assento é ajustável em incrementos de 1cm, o que permite conseguir distintos ângulos de assento. O centro de gravidade, pode situar-se em infinitas posições para selecionar uma condução mais ativa ou mais passiva. O ângulo do encosto é ajustável, assim como a altura e profundidade do mesmo, para que se encontre sempre a posição que melhor se adaptam ao usuário.

Ângulo do encosto - Fácil de ajustar



Centro de gravidade ajustável



Ajuste do ângulo de assento

Opcionais



Rodas anti-tombo

Rodas de 2", ajustáveis em altura.
Podem ser removidas ou escamoteadas para dar mais liberdade ao usuário.

Apoio de braços

Modelo tubular revestido com borracha.
Pode ser escamoteado lateralmente ou removido.



Cinto pélvico

Com dois pontos de fixação, assegura a pélvis para um melhor posicionamento.
Possui uma fivela de engate rápido e acolchoado para maior conforto.




Protetor de quadro


Desenvolvido para proteger a pintura do quadro no momento das transferências, transporte da cadeira e ao colocá-la no bagageiro ou porta malas.



/// 3

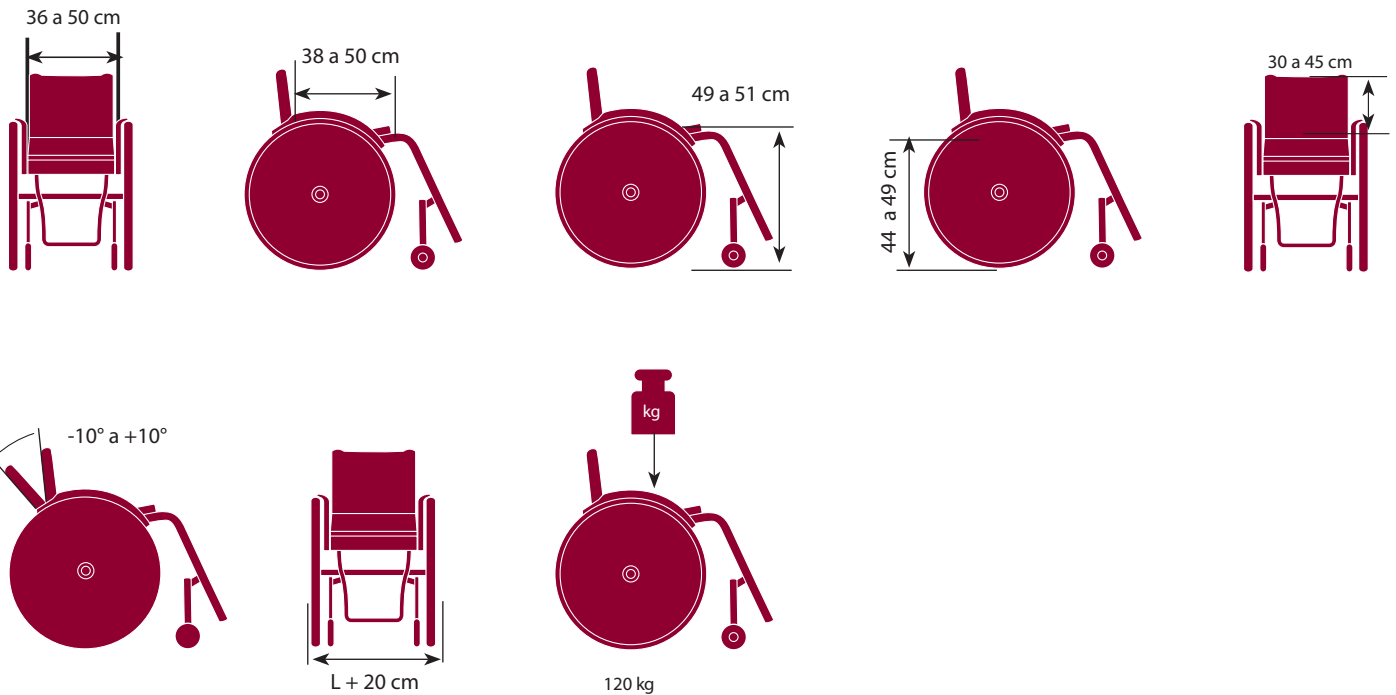

Especificações técnicas

Largura do assento:	36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	Roda dianteira:	24 x 1" inflável
Profundidade do assento:	38 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	Roda traseira:	5 x 1,5" maciça
Altura dianteira do assento:	49 a 51 cm	Cambagem:	0° / 3°
Altura traseira do assento:	44 a 48 cm	Centro de Gravidade:	ajustável de 0 a 5 cm
Alturas de encosto:	30 a 45 cm (em incrementos de 5 cm)	Peso máximo do usuário:	120 kg
Assento:	Rígido	Peso da cadeira sem as rodas :	11 kg
Encosto:	Anatômico ajustável	Peso total da cadeira:	14 kg
Largura total:	Largura de assento + 20 cm (0° cambagem) Largura de assento + 25 cm (3° cambagem)	Cores do quadro:	

Para mais informação sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a fábrica.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, a Ortobras reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

ortobras
A VIDA NÃO PARA



Ortobras Ind. e Com. de Ortopedia Ltda.
Rua Duren, 298
Barão - RS
Tel: +55 51 3696-9600
www.ortobras.com.br